

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test


SIEMENS
Healthineers 



Schritt-für-Schritt-Anleitung



Warum machen wir Selbsttests?

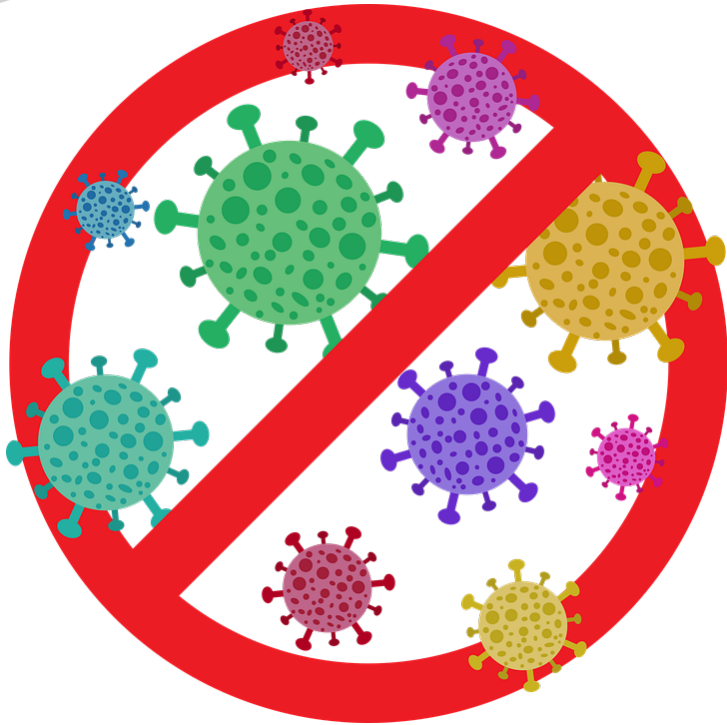

- Sicherheit in der Schule erhöhen
- Infektionsketten durchbrechen

1 Hände waschen oder desinfizieren


Testraum/
Klassenzimmer
gut **LÜFTEN!**

AHA
+L





Vorbereitung durch die Lehrkraft

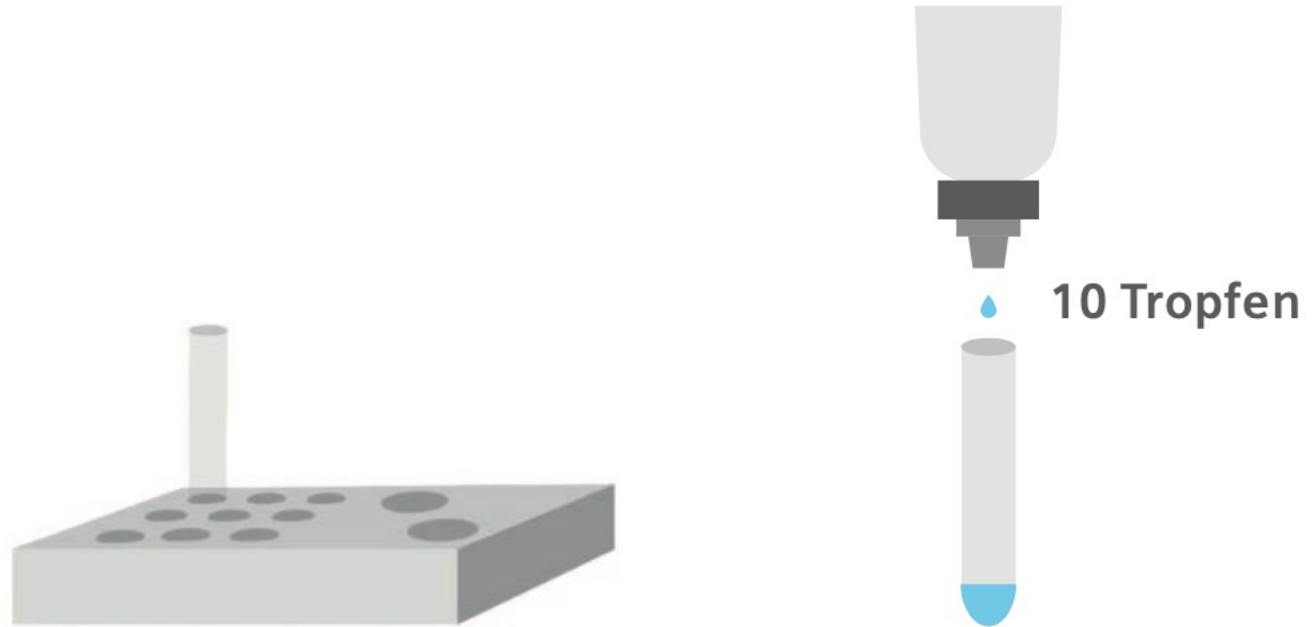

Teströhrchen in der Arbeitsstation
mit jeweils 10 Tropfen der Pufferlösung befüllen

3

Vorbereitung der Teststation durch die Schülerinnen und Schüler

steriler Tupfer (Teststäbchen)



Testkassette



Kappe



Teströhrchen



Plastik-
beutel





Wäscheklammer



4


Teststäbchen aus der Verpackung nehmen

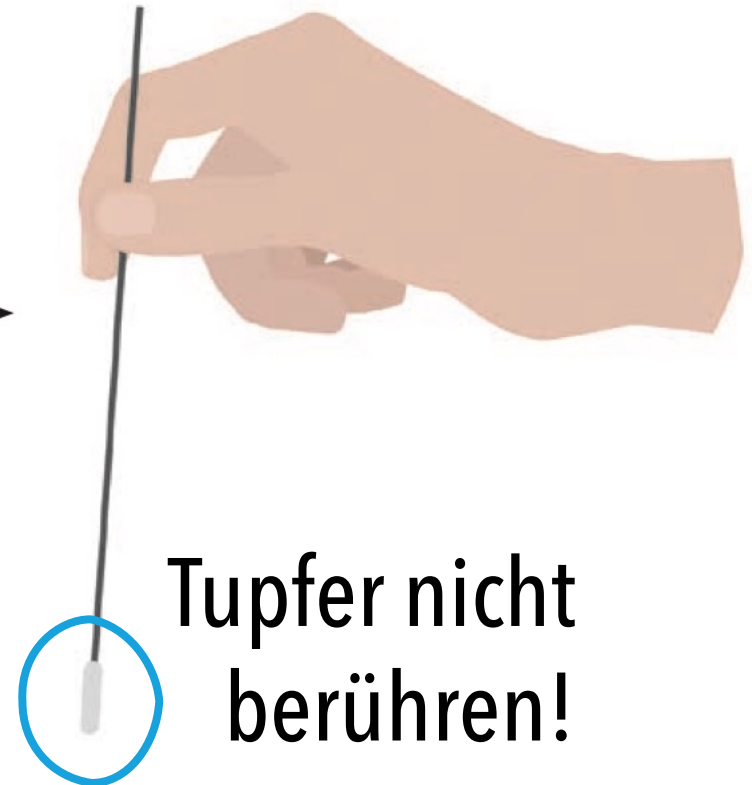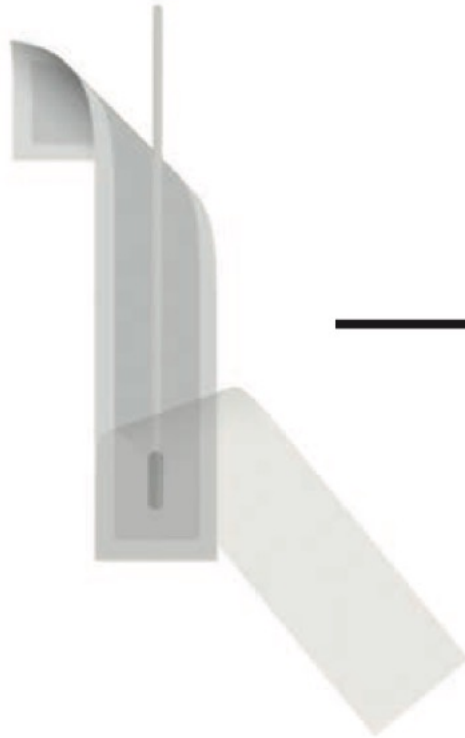


Tupfer nicht
berühren!

5

Abstrich in **BEIDEN** Nasenlöchern

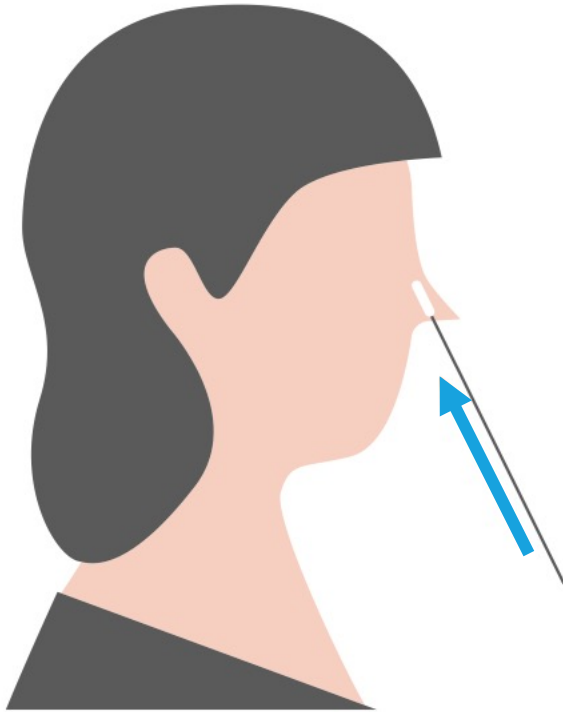

Teststäbchen
ca. 2 cm einführen

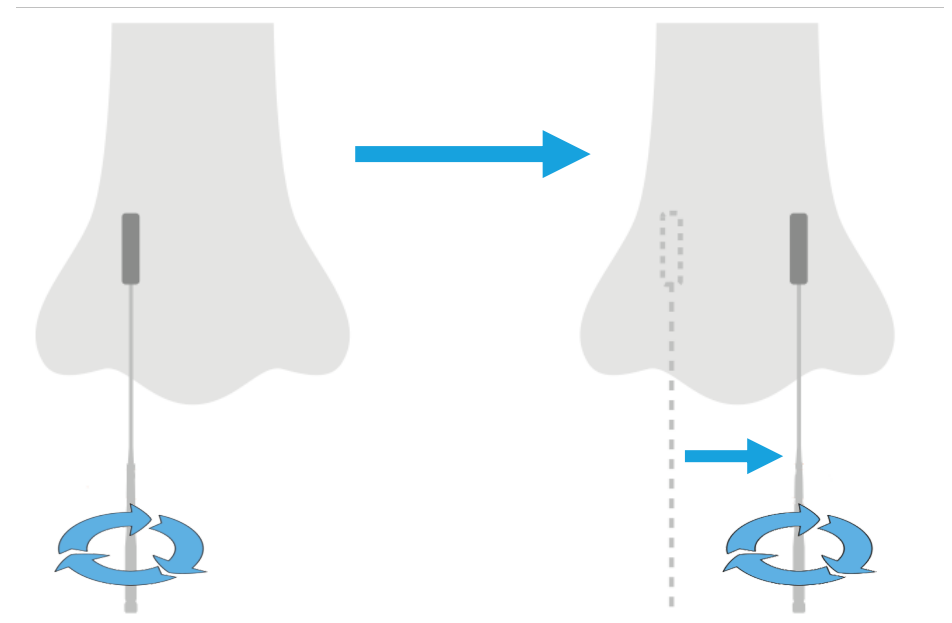


5-mal drehen

5-mal drehen


6

Teststäbchen in die Pufferlösung geben

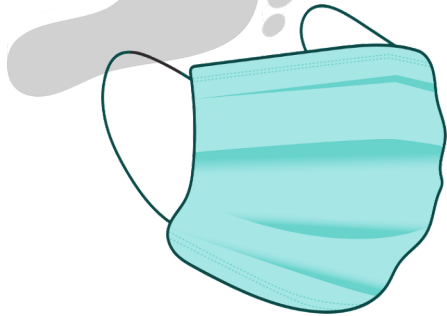


Maske wieder aufsetzen!

- Teststäbchen mindestens 6-mal drehen
- DABEI gegen die Seiten und den Boden des Röhrchens drücken

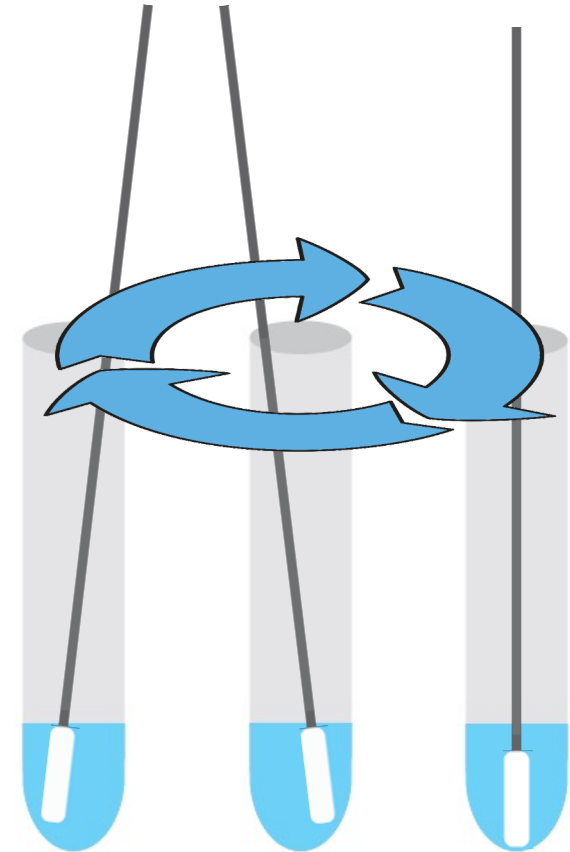




1 Minute warten

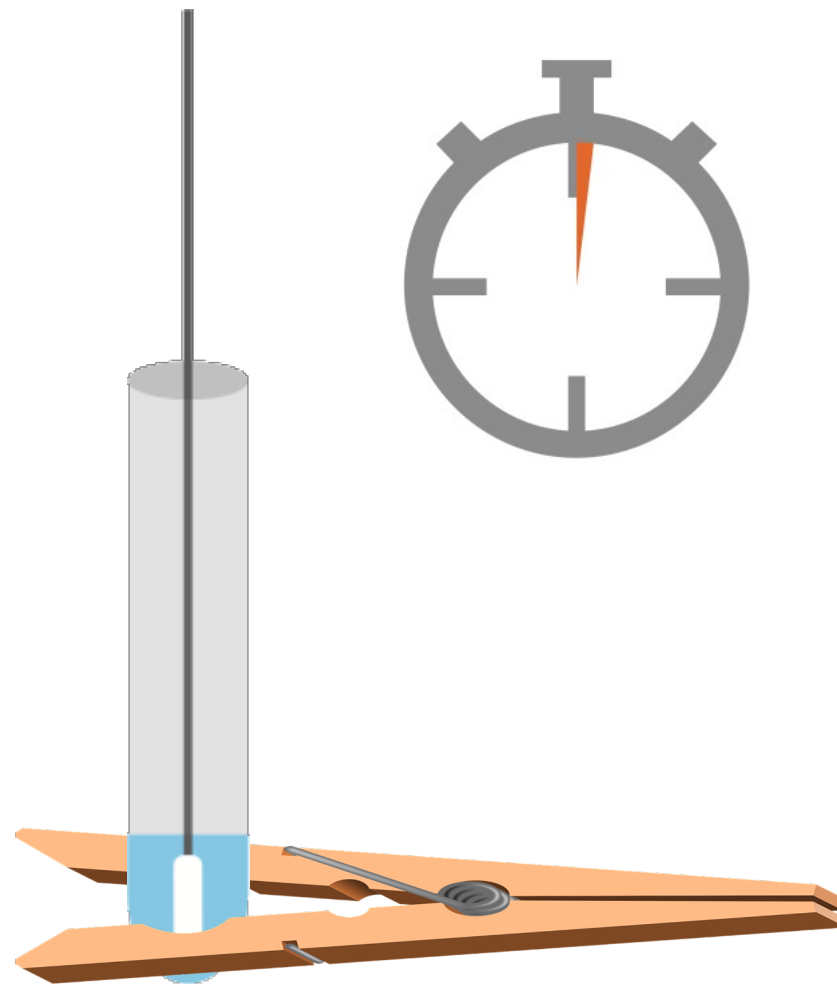




Tupfer ausdrücken

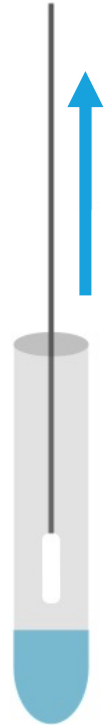

Teststäbchen ein Stück
nach oben ziehen

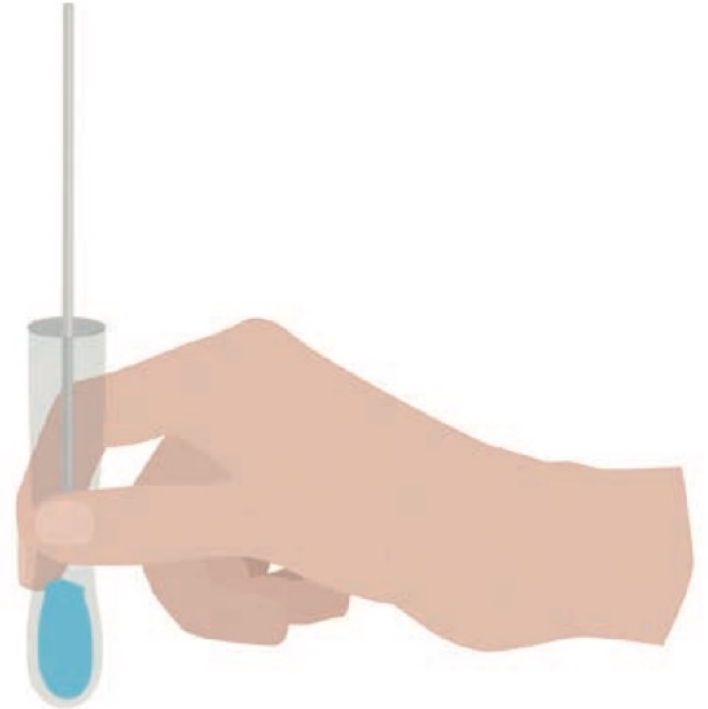

Röhrchen mehrmals
fest zusammendrücken



Teststäbchen „entsorgen“





Röhrchen mit der Kappe verschließen







4 Tropfen in die runde Vertiefung
der Testkassette geben






15 Minuten warten

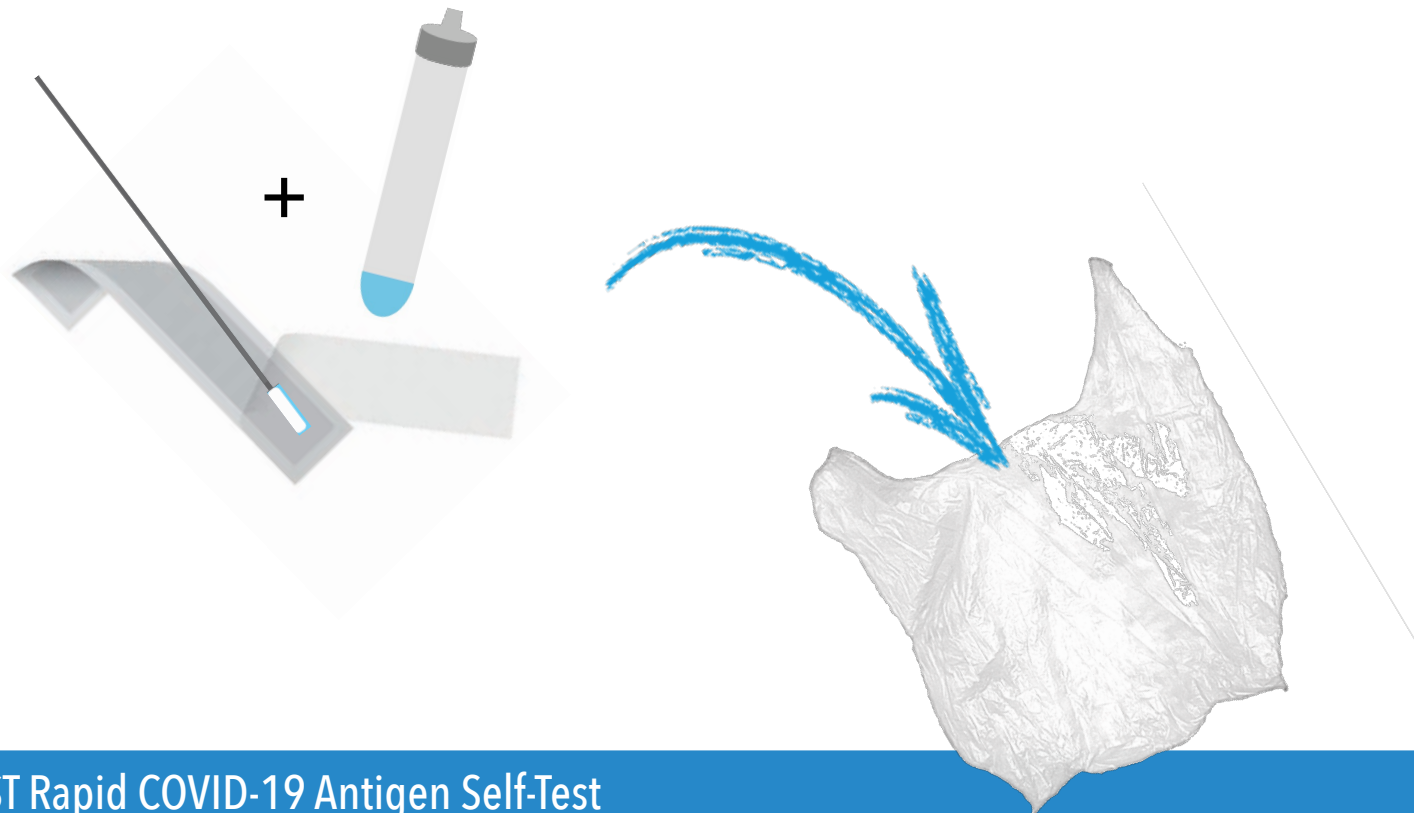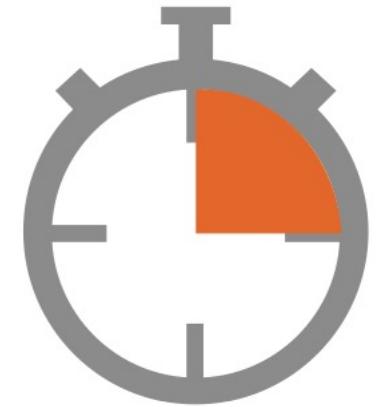




Testergebnis ablesen


POSITIV

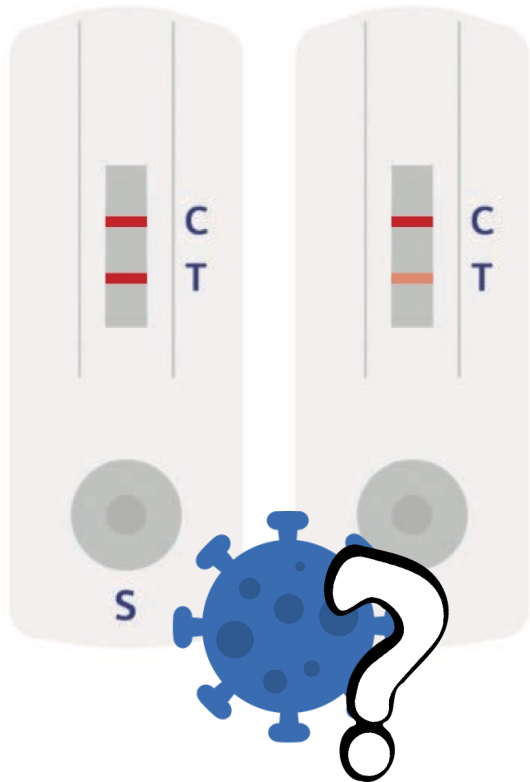

NEGATIV

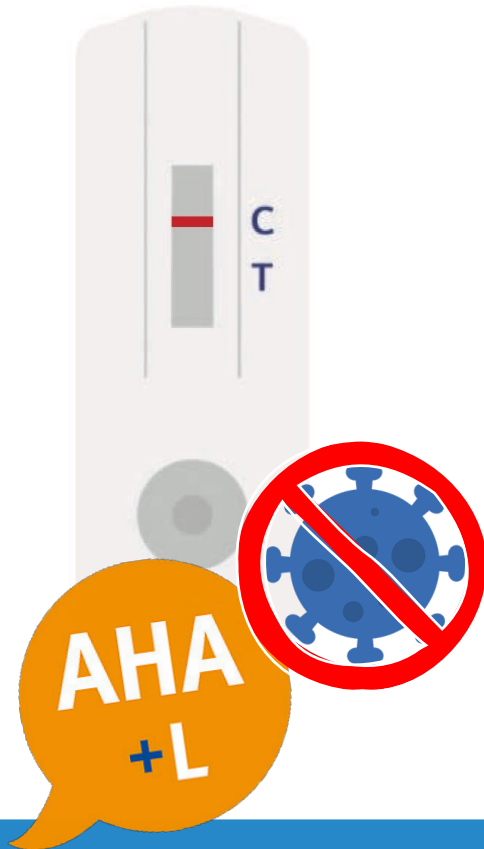

UNGÜLTIG

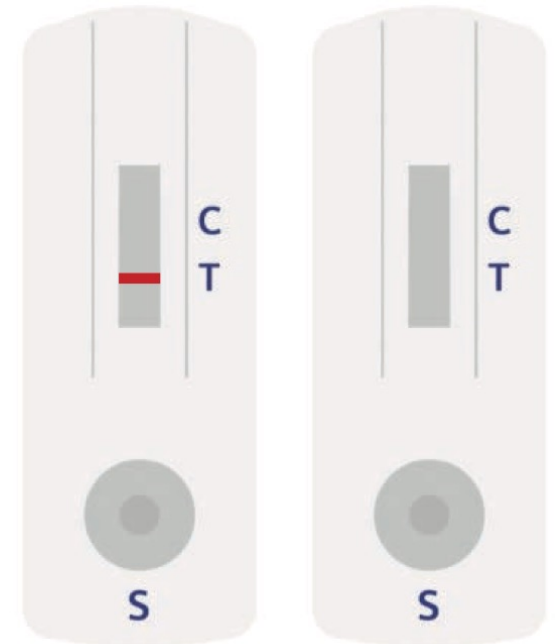

Test wiederholen

14

Test komplett entsorgen





Hände waschen oder desinfizieren






Schnelltest positiv!?



POSITIV

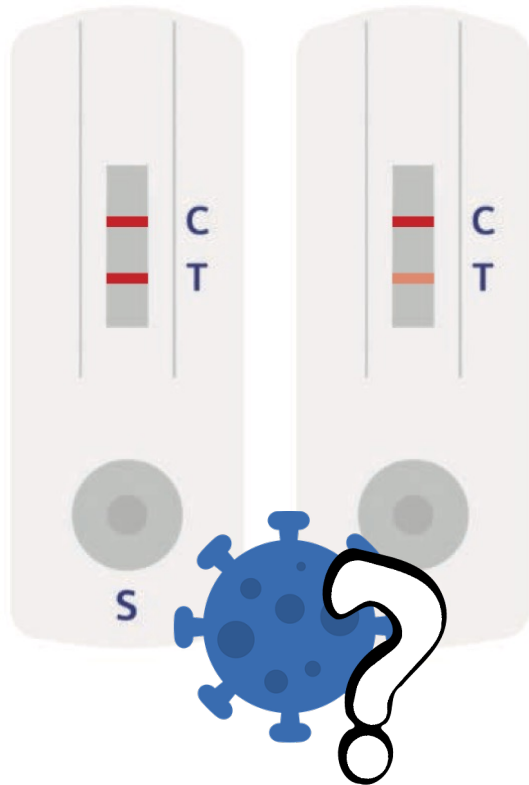

- Testraum/Klassenzimmer verlassen
- Eltern/Erziehungsberechtigte anrufen
- in einem isolierten Bereich warten
- sich abholen lassen (keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen!)
- Gesundheitsamt informieren
- PCR-Test machen, um das Ergebnis des Schnelltests zu überprüfen



Quellen

Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: <https://km.bayern.de/selbsttest>

Kurzanleitung Clinitest: <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/>

Bildquellen: Kurzanleitung Clinitest und <https://pixabay.com/de/>

https://www.bgbau.de/fileadmin/_processed_/b/7/csm_0013245_8a0cb_d6622.jpg